

# EL&FLEX



**EINE NEUE GENERATION VON  
ELEKTROROLLSTÜHLEN**

# WARUM ELOFLEX?

---

Mit einem Eloflex können Sie die Kontrolle über Ihr Leben zurückgewinnen und die Freiheit wiederentdecken, Reisen und Ausflüge in Ihrem eigenen Auto zu genießen. Endlich gibt es einen praktischen und nützlichen Elektrorollstuhl, der

in Schweden von Rollstuhlfahrern entwickelt wurde, um Ihr Leben einfacher und komfortabler zu machen. Erleben Sie den Unterschied mit Eloflex und erobern Sie sich Ihre Freiheit zurück!

## KLAPPBAR

Der Eloflex ist eine völlig neue Generation von klappbaren elektrischen Rollstühlen mit einer Vielzahl von einzigartigen Eigenschaften. Dank seines modernen Designs können Sie ihn eigenhändig auf eine kompakte Größe zusammenklappen, um ihn zu Hause oder im Auto praktisch zu verstauen. Er nimmt wenig Platz ein und lässt sich durch sein außergewöhnlich geringes Gewicht leicht mitnehmen. Mit Eloflex erobern Sie sich Ihre Freiheit zurück – ein Gefühl, das Sie überall hin mitnehmen können.



## AUSSERGEWÖHNLICH LEICHT

Ein Elektrorollstuhl von Eloflex wiegt bis zu 80 % weniger als ein herkömmlicher Elektrorollstuhl. Die Tatsache, dass er mit einem einzigen Handgriff auch mühelos zusammengeklappt werden kann, sorgt für eine unschlagbare Kombination. Er ist schlank und kompakt und lässt sich für Ausflüge leicht im Auto verstauen. Sie sind völlig unabhängig von Fahr- und Beförderungsdiensten. Eloflex gibt Ihnen Ihre Freiheit zurück.

## MODERNSTE TECHNOLOGIE

Der Eloflex wurde mit modernster Technologie entworfen, gebaut und hergestellt. Seine äußerst effizienten Lithium-Ionen-Akkus sind weitaus leistungsstärker als alte Bleibatterien, sowohl hinsichtlich der Performance als auch des Gewichts. Die leistungsstarken bürsten- und getriebelosen Direktantriebsmotoren sind direkt auf den Rädern montiert. Dadurch sind sie leiser und effizienter als die sperrigen Motoren von herkömmlichen elektrischen Rollstühlen. Im Gegensatz zu vielen anderen Marken wird Ihr Eloflex immer mit zwei Akkus geliefert.



## UNTERWEGS

Die klappbaren Elektrorollstühle von Eloflex eignen sich perfekt für Ausflüge, Reisen mit dem Auto und Taxifahrten zu Ihrem Urlaubsziel. Jetzt können Sie die Enkelkinder oder Familie und Freunde zu Ihren eigenen Bedingungen besuchen.

# EINE NEUE GENERATION VON ELEKTROLLSTÜHLEN

Eloflex ist ein Elektrorollstuhl, der in Modellen für alle Personengruppen erhältlich ist. Unabhängig von Ihrem Alter oder Ihrer körperlichen Verfassung bietet Eloflex zusätzliche Freiheit zu Hause und

unterwegs, ohne dass externe Hilfe erforderlich ist. Durch sein geringes Gewicht lässt er sich leicht zusammenpacken und in Ihrem Auto mitnehmen.

## UNABHÄNGIGE FREIHEIT

Es ist leicht zu verstehen, wie sich die Eloflex Lösung positiv auf das tägliche Leben so vieler Menschen auswirkt. Zunächst einmal handelt es sich um eine klappbare, leichte elektrische Lösung, die sich perfekt für das Auto und für Reisen eignet. Noch wichtiger ist jedoch, dass sie ein neues Maß an Mobilität bietet, das es bisher nicht gab, weil herkömmliche Elektrorollstühle, die oft zwischen 80 und 150 kg wiegen, nicht zusammenklappbar sind.

Mit seiner kompakten Bauweise und dem hohen Fahrkomfort sind Ihnen bei der Fortbewegung so gut wie keine Grenzen gesetzt. Sie können durch den Park oder in die Stadt fahren, um belebte Geschäfte, Cafés und Restaurants zu besuchen.

Moderne Akkus, die für Flugzeuge zugelassen sind, sorgen dafür, dass Sie Ihren Eloflex auch im Flugzeug einchecken können.



## KOMPAKT UND VIELSEITIG

Herkömmliche Elektrorollstühle sind in der Regel groß, sperrig und wiegen mehr als 100 kg. Das macht es schwierig, sie für Ausflüge in ein Auto zu packen, geschweige denn zu heben. Zu Hause nehmen sie übermäßig viel Platz ein und sind ziemlich schwerfällig zu fahren. Aber das muss nicht so sein. Der Eloflex stellt einen völlig modernen Ansatz für elektrische Rollstühle dar, die aus Aluminium oder Kohlenfaser hergestellt werden. Mit einem einfachen Handgriff lässt er sich mühelos zusammenfalten, so dass er nur wenig Platz einnimmt, und sein außergewöhnlich geringes Gewicht ist ideal für den einfachen Transport in Ihrem Auto.

Aufgrund seiner kompakten Abmessungen, des Hinterradantriebs und des gleichen Sitzdesigns, das auch bei manuellen Rollstühlen verwendet wird, bietet Ihnen der Eloflex eine vergleichbare Leistung. Der enge Wenderadius und die hohe Präzision ermöglichen es Ihnen, mühelos in engen Räumen und durch schmale Türen zu manövrieren.



Einfach einzuladen, leicht mitzunehmen

**ULTRALEICHT**



Langlebiges Design mit 2 Jahren Garantie

**HOHE QUALITÄT**



Zwei Akkus für zusätzliche Sicherheit

**GROSSE REICHWEITE**

# MODEL F

Der Eloflex F ist der gefragteste Elektrorollstuhl auf dem Markt. Mit einzigartigen Merkmalen wie seinem klappbaren, kompakten Design und seinem leichten Aluminiumrahmen hat er die Hilfstechnologien revolutioniert. Das Eloflex F-Modell hat Tausenden von Benutzern, die Schwierigkeiten beim Gehen haben, ihre Freiheit zurückgegeben.

Dieses vielseitige Modell eignet sich für Personen jeden Alters, unabhängig von ihren Bedürfnissen. Seine moderne Technologie mit leistungsstarken bürstenlosen Motoren und serienmäßig zwei Lithium-Akkus sorgt für außergewöhnliche Fahrleistungen und eine beeindruckende Reichweite von über 30 km.



GEWICHT IN KG

26

REICHWEITE IN KM

30

SITZHÖHE IN CM

52

MAXIMALES BENUTZERGEWICHT IN KG

120

LEISTUNG IN WATT

2X 250

# MODEL L

Der Eloflex L ist ein kompakter, unkomplizierter Elektrorollstuhl für unkomplizierte Menschen, die viel unterwegs sind. Er lässt sich in Sekundenschnelle zusammenfalten, so dass Sie ihn leicht mitnehmen können, wenn Sie mit dem Auto oder dem Flugzeug unterwegs sind.

Das Eloflex L-Modell ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die es bequem und sicher haben wollen. Dank der soliden Rädern entfällt das Aufpumpen und Sie müssen sich keine Sorgen um platte Reifen mehr machen. Sein schlankes und wendiges Format ist besonders in Innenräumen von Vorteil, da Sie mühelos durch enge Türen und Räume navigieren können.



GEWICHT IN KG

25,5

REICHWEITE IN KM

30

SITZHÖHE IN CM

52

MAXIMALES BENUTZERGEWICHT IN KG

120

LEISTUNG IN WATT

2X 200

# MODEL P

Eloflex P verfügt über eine eingebaute elektrische Kippfunktion im Sitz, die das Ein- und Aussteigen erleichtert. Dieses Modell ist für Menschen gedacht, die Schwierigkeiten beim Aufstehen aus einem Standardstuhl haben. Mit dem elektrischen Lift ist der Übergang einfacher und sicherer.

Mit dem elektrischen Sitzlift ist das Aufstehen nicht nur leichter, sondern auch sicherer. Und er bietet Unterstützung beim Erreichen höher gelegener Orte wie Schränke und Regale, sowohl zu Hause als auch in Geschäften. Das P-Modell verfügt im Vergleich zu unseren anderen Modellen über eine höhere Sitzhöhe, was das Aufstehen ebenfalls erleichtert. Daher ist Eloflex P eine ausgezeichnete Wahl für etwas größere Benutzer, da er eine höhere Sitzposition und die Flexibilität bietet, die Rückenlehne nahtlos anzuheben.



GEWICHT IN KG

28

REICHWEITE IN KM

30

SITZHÖHE IN CM

54

MAXIMALES BENUTZERGEWICHT IN KG

160

LEISTUNG IN WATT

2X 250

# MODEL D2

Der Eloflex D2 ist ein innovativer, klappbarer Elektrorollstuhl, der das gleiche schlanke Design wie unsere anderen Elektrorollstühle aufweist, aber mit einem cleveren Clou: Er kann in zwei Teile zerlegt werden. Diese beiden Teile bieten ein Ladegewicht von 14 bzw. 16 kg, was den Transport und das Verladen des Stuhls in den Kofferraum erleichtert.

Das stabile D2-Modell eignet sich für Nutzer mit einem Gewicht von bis zu 160 kg und bietet Komfort und leichte Manövrierbarkeit. Der Eloflex D2 ermöglicht es Ihnen, ein aktives Leben zu führen, egal ob es sich um Spaziergänge, Reisen oder alltägliche Ausflüge handelt.



GEWICHT IN KG

14 + 16

REICHWEITE IN KM

30

SITZHÖHE IN CM

50

MAXIMALES BENUTZERGEWICHT IN KG

160

LEISTUNG IN WATT

2X 250

# MODEL H

Mit dem Eloflex H-Modell haben wir das Unmögliche geschafft: einen leistungsstarken Elektrorollstuhl, der speziell für unsere schwereren und größeren Nutzer entwickelt wurde, denn er eignet sich für Nutzer mit einem Gewicht von bis zu 200 kg. Bemerkenswert ist, dass er darüber hinaus zusammengeklappt und in einem normalen Auto transportiert werden kann.

Das H-Modell ist ein geräumiger Stuhl mit hervorragenden Fahreigenschaften und viel Platz für ausgewachsene Personen. Dieses Modell bietet einen flexiblen Einsatz dank seiner großzügigen Sitzbreite, der bequemen Sitzhöhe und einem Design, das auch größeren Personen eine bequeme Sitzposition bietet.



GEWICHT IN KG

43

REICHWEITE IN KM

40

SITZHÖHE IN CM

54

MAXIMALES BENUTZERGEWICHT IN KG

200

LEISTUNG IN WATT

2X 400

# MODEL K

Der Eloflex K ist ein kompakter, leichter und klappbarer Elektrorollstuhl für Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 15 Jahren. Das K-Modell befähigt Kinder und junge Erwachsene, aktiv am Leben teilzuhaben und erleichtert ihnen die Teilnahme an alltäglichen Aktivitäten wie Schulausflügen, Einkäufen, Restaurants, Ausflügen und Besuchen bei Freunden und Familie – und das alles ohne spezielle Transportmittel.

Das K-Modell zeichnet sich durch ein kompaktes und leichtes Design aus und bietet die gleiche elegante Ästhetik, die auch bei anderen Eloflex-Modellen zu finden ist. Der Stuhl ist durchdacht gefertigt, um sich an das Wachstum seiner Benutzer anzupassen. Er bietet einfache Höhen- und Breitenverstellungen, um den sich entwickelnden Anforderungen eines Kindes gerecht zu werden.



GEWICHT IN KG

26

REICHWEITE IN KM

30

SITZHÖHE IN CM

47-52

MAXIMALES BENUTZERGEWICHT IN KG

90

LEISTUNG IN WATT

2X 250

# MODEL Z

Der Eloflex Z ist der exklusivste faltbare Elektrorollstuhl, den es gibt, sowohl in unserem eigenen Sortiment als auch auf dem Markt im Allgemeinen. Dieses Modell ist auf diejenigen zugeschnitten, die das „Beste vom Besten“ wollen und höchste Ansprüche an ihr Hilfsmittel stellen. Der aus Kohlefaser gefertigte Rahmen sorgt für ein außergewöhnlich geringes Gewicht von nur 23 kg. Sein Format ist kompakt, flexibel und klappbar.

Die durchdachten Designmerkmale und ausgeklügelten Details bieten die fortschrittlichsten Einstellmöglichkeiten auf dem Markt und ermöglichen eine optimale Individualisierung. Unübertroffene Fahrleistungen, eine außergewöhnliche Reichweite von bis zu 45 km und hervorragende Zuverlässigkeit sind nur einige Beispiele für die einzigartigen Qualitäten des Modells.



GEWICHT IN KG

20

REICHWEITE IN KM

30

SITZHÖHE IN CM

52

MAXIMALES BENUTZERGEWICHT IN KG

120

LEISTUNG IN WATT

2X 250

# MODEL C3

Der Eloflex C3 kombiniert die beliebtesten Eigenschaften eines Eloflex mit den modernsten Vorteilen der Karbonfaserkonstruktion, was ihn unglaublich leicht und zu Ihrem perfekten Begleiter für den täglichen Gebrauch macht.

Weighing just 20 kg, the Eloflex C3 boasts a sleek design complemented by sturdy wheels and powerful Eloflex motors, ensuring a superior and smooth riding experience. With a maximum user weight capacity of 160 kg and additional space for extra batteries, the Eloflex C3 is engineered to meet and surpass all your expectations, offering both reliability and enhanced mobility.



GEWICHT IN KG

20

REICHWEITE IN KM

30 30

SITZHÖHE IN CM

55

MAXIMALES BENUTZERGEWICHT IN KG

160

LEISTUNG IN WATT

2X 250

# MODEL X

Eloflex X ist ein einzigartiges Design, das speziell auf unsere älteren Benutzer zugeschnitten ist. Dies ist der beliebteste Elektrorollstuhl für Senioren auf dem Markt. Er basiert auf der bewährten und weithin geschätzten Technologie mit Kreuzstrebenrahmen. Das Zusammenklappen des Stuhls ist ein Kinderspiel, denn dafür muss lediglich die Sitzfläche angehoben werden.

Der Eloflex X ist das Ergebnis jahrelanger wertvoller Rückmeldungen, Kommentare und Wünsche unserer treuen älteren Nutzer. Es ist ein „reines Seniorenmodell“ mit allen Funktionen und Lösungen, die man sich wünschen kann.



GEWICHT IN KG

25

REICHWEITE IN KM

25

SITZHÖHE IN CM

51

MAXIMALES BENUTZERGEWICHT IN KG

120

LEISTUNG IN WATT

2X 250

# MODEL S1

Mit dem bahnbrechenden und einzigartigen Hybrid-Scooter von Eloflex können Sie sich sowohl drinnen als auch draußen mühelos bewegen, während Sie Ihren Scooter problemlos in Ihrem Auto transportieren oder auf einen Flug mitnehmen können. Es spricht also nichts dagegen, lange Spaziergänge zu unternehmen, einzukaufen, Freunde und Familie zu treffen oder zu reisen.

Einen leichten Scooter, der einfach mitzunehmen, aber dennoch robust genug für Outdoor-Abenteuer in anspruchsvollen Umgebungen ist. Der Eloflex S1 ist so konstruiert, dass er allen Jahreszeiten standhält, einschließlich der rauen nordischen Winter, was ihn zu einer vielseitigen und zuverlässigen Wahl für ganzjährige Mobilität macht.



GEWICHT IN KG

37,5

REICHWEITE IN KM

30

SITZHÖHE IN CM

55-60

MAXIMALES BENUTZERGEWICHT IN KG

120

LEISTUNG IN WATT

2X 250

# ZUBEHÖR

---

Machen Sie Ihren Eloflex noch brillanter, indem Sie ihn mit unserem beliebten und smarten Zubehör an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.



## ELOFLEX PREMIUM-KISSEN

Ease by Eloflex bietet eine Reihe von ergonomischen Kissen aus schwedischer Produktion, die entwickelt wurden, um Ihre Eloflex Erfahrung zu optimieren.



## SEITENTASCHE

Mit der Eloflex Seitentasche können Sie Gegenstände wie Geldbörse, Telefon und andere Wertsachen bequem verstauen und leicht darauf zugreifen.



## REISESCHUTZABDECKUNG

Unsere Reiseschutzabdeckung ist das perfekte Zubehör für Liebhaber von Eloflex, die beim Transport zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen treffen möchten.



## LADERAMPEN

Laden Sie Ihren Eloflex mit Hilfe der zusammenklappbaren und leicht anzuhebenden Laderampen mühelos ins Auto.




## BEGLEITPERSONENSTEUERUNG

Dank unserer Begleitpersonensteuerung können Personen, die hinter oder neben dem Rollstuhl gehen, den Elektrorollstuhl mit Hilfe des Joysticks steuern, so dass die sitzende Person mühelos mitfahren kann.



## JOYSTICKVERLÄNGERUNGEN

Eloflex bietet zwei Varianten von Joystickverlängerungen an, um einer Vielzahl von Anforderungen gerecht zu werden.

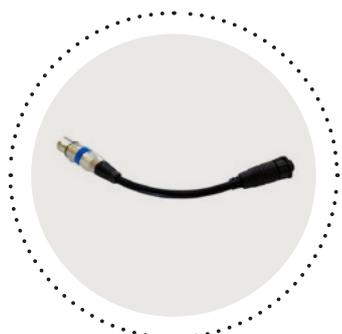

## LADEADAPTER

Mit dem Eloflex Ladeadapter können Sie das Ladegerät direkt an den Akku anschließen.



## VERSTELLBARE FUßSTÜTZE

Mit unserer verstellbaren Fußstütze können Sie den Winkel der Fußplatte zwischen 0 und 90 Grad einstellen



## VERSTELLBARE KOPFSTÜTZE

Die Eloflex Kopfstütze ist eine äußerst vielseitige Option für zusätzliche Unterstützung von Kopf und Nacken.

# EASE VERBESSERT IHR ELOFLEX-ERLEBNIS

Langes Sitzen kann mitunter zu Beschwerden im Rücken- und Gesäßbereich, zu Hautreizungen, Krämpfen oder im schlimmsten Fall zu Druckstellen und Geschwüren führen. Die ergonomischen

Sitzkissen unserer Ease-Reihe helfen, unnötige Beschwerden zu vermeiden und Druckgeschwüren vorzubeugen. Außerdem lindern sie Schmerzen und bestehende Probleme.

## PREMIUM-KISSEN - EASE ONE

Ease One ist ein weiches und besonders bequemes Premium-Kissen, das für Menschen entwickelt wurde, die längere Zeit im Sitzen verbringen. Das Kissen verfügt über ein Bett aus Schraubenfedern, die strategisch unter den Gesäßknochen und dem Steißbein platziert sind. Die Konturen sind außerdem so geformt, dass sie die Oberschenkel besser stützen und stabilisieren. Ease One eignet sich besonders gut für den Einsatz in Elektrorollstühlen, da seine fortschrittliche Federung den Rücken und das Steißbein auf unebenem Untergrund schützt.

## PREMIUM-KISSEN - EASE WEDGE

Ease Wedge ist ein keilförmiges Sitzkissen, das an der Vorderseite erhöht ist. Es wurde speziell entwickelt, um den Komfort von Personen mit längeren Beinen zu verbessern, die länger sitzen. Das ergonomische Design verteilt den Druck und bietet ein weiches Gefühl, das sowohl die Oberschenkelknochen, die „Sitzknochen“ des Beckens als auch das Steißbein entlastet.

## EASE ARMSTÜTZENPOLSTER

Das Ease Armstützenpolster ist ein weicher Armlehnenbezug, der für Ihren Eloflex entwickelt wurde. Mit einer 1 cm dicken, weichen Schaumstoffpolsterung schützt er Sie vor Vibrationen, während er gleichzeitig das Risiko von Druckstellen und Reizungen reduziert. Er verbessert auch die Stabilität und verhindert, dass Ihr Arm von der Armlehne rutscht.

## EASE POLSTERUNG FÜR RÜCKENLEHNENROHR

Die Ease Polsterung für das Rückenlehnenrohr ist ein weicher Schaumstoffbezug, der für die Rückenlehne Ihres Eloflex entwickelt wurde. Sie bietet ein weicheres und angenehmeres Gefühl, wenn Sie sich in Ihrem Stuhl zurücklehnen. Außerdem erhalten Sie zusätzliche Rückenstütze und Komfort beim Fahren auf unebenem Untergrund.

## EASE LENDENWIRBELSTÜTZE

Die Ease Lendenwirbelstütze besteht aus festem und strapazierfähigem viskoelastischem „Memory“-Schaum. Im Gegensatz zu normalem Schaumstoff reagiert Memory-Schaum auf Körperwärme und Druck, wird weicher und passt sich der Lendenwirbelsäule an, um die Ermüdung des Rückens zu reduzieren.

## EASE INKONTINENZBEZUG

Der Umgang mit Inkontinenz im Rollstuhl sollte nicht stressig oder kompliziert sein. Unser wasserdichter Inkontinenzbezug vereinfacht Ihren Alltag und bietet einen hervorragenden Schutz vor Regen und Feuchtigkeit, wenn Sie sich im Freien aufhalten.



Wenn sich das Leben plötzlich ändert

# MARIE HAT MIT ELOFLEX WAHRE FREIHEIT GEFUNDEN

---



**Hopptimisten, oder Marie Hav Lunkvist, wie sie eigentlich heißt, ist eine aktive Geschäftsfrau, die derzeit aufgrund einer Krankheit im Rollstuhl sitzt. Sie sieht das Leben als ein Geschenk und ist voller Hoffnung und Optimismus!**

Ich habe meinen Eloflex im Februar 2018 bekommen, davor hatte ich etwa sechs Jahre lang andere Rollstühle. Ich bin ein aktiver Mensch, der viel mit Vorträgen unterwegs ist und ich engagiere mich privat und in der Familie in vielen verschiedenen Bereichen. Ich reise sowohl in die Berge als auch auf Schärenreisen, und bei diesen Gelegenheiten war es für mich absolut notwendig, einen flexiblen und leichten Elektrorollstuhl zu haben.

Nicht nur auf Reisen habe ich den Eloflex dabei, sondern auch in überfüllten Geschäften oder bei so alltäglichen Dingen wie der Tür des Nachbarn, die für meinen normalen Elektrorollstuhl zu schmal ist. Ich muss mir keine Sorgen mehr machen, dass ich nicht tun kann, was ich will, wann ich will und zu meinen eigenen Bedingungen. Das ist echte Freiheit!



# TECHNISCHE DATEN

MODELL	F	L	P	D2	H	K	C	Z	C3	X	S1
<b>NETTOGEWICHT</b>	27 kg	25,5 kg	30 kg	14+16 kg	42,5 kg	28,5 kg	16 kg	23 kg	20 kg	25 kg	37,5 kg
<b>REICHWEITE</b>	30 km	30 km	30 km	30 km	40 km	30 km	15 km	30 km	30 km	25 km	30 km
<b>MAX. BENUTZERGEWICHT</b>	120 kg	120 kg	160 kg	160 kg	200 kg	90 kg	100 kg	120 kg	160 kg	120 kg	120 kg
<b>GESCHWINDIGKEIT</b>	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	8 km/h	6,5 km/h	6 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	9 km/h
<b>BATTERIE</b>	2x Litium ION 10AH/24V	2x Litium ION 20AH/24V	2x Litium ION 10AH/24V	2x Litium ION 12AH/24V	2x Litium ION 10AH/24V						
<b>WENDERADIUS</b>	78 cm	76 cm	85 cm	89 cm	99 cm	78 cm	60 cm	78 cm	87 cm	88 cm	100 cm
<b>RÄDER VORNE</b>	8" solid	8" solid	8" solid	8" solid	9" air	8" comfort	7" solid	8" comfort	10" air	8" solid	12" air
<b>RÄDER HINTEN</b>	12" air	10" solid	12" air	12" air	13" air	12" air	8,5" solid	12" air	12" air	12" air	12" air
<b>HÖHE DES SITZES</b>	52 cm	52 cm	54 cm	50 cm	54 cm	47-52 cm	47,5 cm	52 cm	55 cm	51 cm	55-60 cm
<b>BREITE DES SITZES</b>	45/50/55 cm	45/50/55 cm	45/50/55 cm	45/50/55 cm	51/56/61 cm	36-44 cm	44 cm	49 cm	43 cm	45/50/55 cm	45/50/55 cm
<b>SITZTIEFE</b>	43-48 cm	43-48 cm	43-48 cm	44-47 cm	51 cm	36 cm	42 cm	45 cm	44 cm	43-48 cm	40 cm
<b>GRÖSSE (HXBXT)</b>	95x63x100 cm	95x59x99 cm	90x62x107 cm	96x62x107 cm	103x66x115 cm	89x63x100 cm	93x57x93 cm	100x62x110 cm	95x63x100 cm	100x62x102 cm	91x63x105 cm
<b>GRÖSSE ZUSAMMENGEKLAPPT (HXBXT)</b>	75x63x40 cm	70x59x35 cm	74x62x40 cm	67/52x63/63x50/35 cm	83x66x45 cm	75x55x36 cm	79x57,5x32,5 cm	75x64x37 cm	75x63x40 cm	76x32x78 cm	55x63x105 cm

Das Nettogewicht enthält keine Batterien. Empfohlener Luftdruck für luftgefüllte Räder = 2,5 kg. Eloflex ist von der schwedischen Arzneimittelbehörde als Medizinprodukt eingestuft und erfüllt die geltenden Anforderungen der EU-Verordnung (2017/745), Medical Device Regulations (MDR), die die Sicherheit und Leistung von Medizinprodukten gewährleistet. Es ist CE-geprüft, getestet und zugelassen gemäß EN12184, ISO-7176, IEC-60601 und die Batterien sind nach UN38.3 flugtauglich.

Unter [www.eloflex.eu](http://www.eloflex.eu) finden Sie lokale Informationen, Videos, Bilder und den nächstgelegenen Fachhändler.

**EL&FLEX**  
THE SMART WHEELCHAIR FOR ANY OCCASION

Eloflex HQ

Hammarbacken 4B  
191 49 Sollentuna  
SWEDEN